

# Dino-Eye AM7025X

Вы можете превратить ваш традиционный микроскоп в цифровой микроскоп

- ▶ 5 мегапикселей разрешающая способность
- ▶ Подходит к окулярам 23, 30, 30.5 мм
- ▶ Повышенные возможности программному
- ▶ превосходное качество изображения и естественную цветопередачу
- ▶ Подсоединяется к адаптеру c-mount




**Dino-Lite**  
**Digital Microscope**  
**The Industry Standard**

# Dino-Eye AM7025X

также доступна версия 1.3MP (AM4025X)

Окулярная камера DinoEye Edge с разрешением 5 Мп обеспечивает превосходное качество изображения и естественную цветопередачу. Благодаря этим качествам камера DinoEye Edge идеально подходит для исследования образцов патологий и контроля качества, то есть случаев, когда от качества цветопередачи зависит результат.

Широкое поле обзора позволит вам захватить больше деталей в пределах одного изображения. Вы можете заменить один из окуляров микроскопа камерой Dino-Eye с диаметром объектива 23 мм или использовать один из доступных адапторов диаметрами 30 и 30,5 мм для лучшей совместимости с микроскопом.

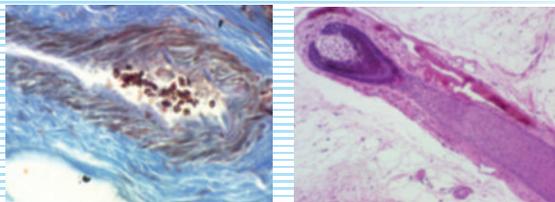

Кроме того, вы можете воспользоваться резьбовым соединением типа С, которое поставляется с 30,5 мм адаптором, для крепления камеры DinoEye к адаптору типа С (не входит в комплект поставки) на тринокулярную трубку микроскопа. Окулярная камера AM7025X подходит практически ко всем доступным маркам и моделям микроскопов. В комплект поставки входит программное обеспечение DinoCapture для Windows и DinoScore для компьютеров MAC. В функционал ПО входят проведение измерений, создание аннотаций и обычного видео, функция замедленной съемки и т. д.



**Dino-Lite**  
Digital Microscope  
The Industry Standard



**IDCP**

IDCP B.V.  
Manuscriptstraat 12-14  
1321 NN Almere  
The Netherlands

Telephone: +31 (0) 20 6186322

info@dino-lite.eu  
www.dino-lite.eu