




## Dino-Lite TrichoScope

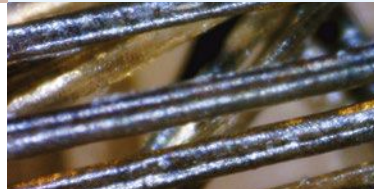

# In uso

## La scienza dei capelli con un Trichoscope Dino-Lite

L'azienda Hantesis vende una vasta gamma di prodotti per il trattamento dei capelli per parrucchieri professionisti di tutta Europa.

Oltre a ciò, Hantesis sta vendendo il TrichoScope Dino-Lite.

“Il TrichoScope consente agli specialisti dei capelli che vendono i nostri prodotti di riconoscere i problemi dei capelli e del cuoio capelluto”, spiega il marketing manager di Hantesis Luca Dellaversana.

## Del TrichoScope dà valore aggiunto ai nostri prodotti e sostiene i nostri specialisti dei capelli

“I nostri specialisti dei capelli possono studiare i capelli, il fusto del capello e il cuoio capelluto con il TrichoScope e determinare quale sia il problema e come può essere risolto. Il dispositivo è molto facile da usare e grazie alla connessione USB i clienti possono vedere il risultato sullo schermo del computer insieme allo specialista. L'immagine ingrandita può essere usata per spiegare al cliente come i nostri prodotti possono aiutare a risolvere il problema. L'utilizzo del TrichoScope dà valore aggiunto ai nostri prodotti e sostiene i nostri specialisti dei capelli nel loro lavoro.”

Hantesis aveva precedentemente lavorato con un microscopio per capelli, ma questo non aveva avuto successo perché era costoso, l'ingrandimento era basso e si doveva studiare il manuale prima di poterlo usare.

Dellaversana: “Poi abbiamo incontrato il TrichoScope di Dino-Lite. Facile da usare, con illuminazione a LED integrata, alimentato via USB e molto conveniente. Abbiamo fatto un vero lavoro con questo e, secondo la mia stima, circa 1.000 specialisti dei capelli ora lavorano con il TrichoScope. Esso dimostra che si prendono sul serio il proprio lavoro e i propri clienti e fornisce soluzioni adatte ai problemi reali. Quindi continueremo ad offrire il TrichoScope Dino-Lite come parte della linea di accessori che forniamo ai nostri clienti. Vi è una chiara domanda per questo.”

La tricoscopia è una scienza relativamente giovane che studia la salute dei capelli e del cuoio capelluto. Viene spesso praticata dai dermatologi, e sempre più da altri professionisti in campo medico. TrichoScope Dino-Lite è un ottimo strumento per la tricoscopia, perfetto per studiare il cuoio capelluto, il fusto del capello e il capello stesso in dettaglio.

Ci sono più di cinquanta cause note per la perdita di capelli e solo uno studio dettagliato può portare alla luce la causa. Le immagini realizzate con TrichoScope possono aiutare a riconoscere i problemi e le malattie della pelle o dei capelli per prendere una decisione su trattamento e farmaci corretti.

### Ampio campo di applicazione

Il TrichoScope non è solo rilevante per il mondo medico. Nella scienza forense (la scienza che si occupa di trovare prove nelle indagini sui crimini) il TrichoScope sta diventando un partner prezioso. Con le immagini del TrichoScope, lo specialista forense può trarre importanti conclusioni quando si tratta di età della vittima, peso, razza e salute. Un'indagine su un crimine può prendere slancio.

Il TrichoScope sta diventando un fenomeno sempre più comune nei saloni di parrucchieri.

I clienti possono letteralmente avere una migliore visione del loro trattamento per capelli guardando i risultati insieme con lo specialista dei capelli su un PC, un laptop o un tablet Windows. I risultati del trattamento con prodotti per la crescita e il miglioramento dei capelli possono essere visualizzati con le immagini prima e dopo.

### Fatto per lavorare

Il TrichoScope è robusto, disponibile con varie gamme di ingrandimento e ci sono modelli disponibili con VGA, 1,3 megapixel e 5 megapixel. Grazie al LED bianco brillante incorporato, non è necessaria una fonte di luce esterna. Il TrichoScope è collegato e alimentato via USB, quindi non sono necessarie batterie. Il filtro polarizzante incorporato nei modelli Pro e Pro HR può essere utilizzato per sopprimere qualsiasi abbagliamento.

Le immagini possono essere visualizzate sullo schermo del PC, del laptop o del tablet Windows e memorizzate digitalmente. Memorizzando le immagini nel database del paziente o del cliente, queste possono essere facilmente confrontate nel tempo.

Il TrichoScope Dino-Lite è conforme alla Direttiva Dispositivi Medici 93/42/CEE, modificata 2007/47/CE ed è compatibile con i principali sistemi operativi come Windows e MacOS. Tutto il software necessario è incluso.



## TrichoScope Basic

Il TrichoScope Basic di Dino-Lite (MEDL3H) è un ottimo strumento per l'esame del cuoio capelluto umano e per l'analisi dei capelli, ad esempio per la ricerca sulla perdita di capelli. Lo speciale cappuccio a forma di cono permette una facile separazione dei capelli sulla testa umana. Con l'alto ingrandimento fino a 200 volte, un singolo capello può essere visualizzato con grande dettaglio.



## TrichoScope UV

Il TrichoScope UV/White (MEDL4HVW) di Dino-Lite dispone di due tipi di luci a LED commutabili fra luce bianca e luce UV. Con un ingrandimento fino a 200 volte possono essere visualizzati con estrema precisione anche i dettagli più piccoli dei capelli e del cuoio capelluto. La luce bianca è utilizzata per gli esami più standard, la luce UV può essere utilizzata per vedere e analizzare fenomeni che si illuminano con la luce UV.



USB 2.0



FUNZIONALITÀ  
MISURAZIONE



REGOLABILI  
~10-70x & 200x



USB 2.0



FUNZIONALITÀ  
MISURAZIONE



REGOLABILI  
~10-70x & 200x



RISOLUZIONE VGA  
640 x 480



8 LED BIANCHI  
COMMUTABILI



BLOCCO  
INGRANDIMENTO



1,3 MEGAPIXEL  
1280 x 1024



UV-LED  
390~400 nm



LED UV/BIANCHI  
COMMUTABILI

## TrichoScope Polarizer HR

Il TrichoScope Polarizer HR di Dino-Lite (MEDL7HM) è un ottimo strumento per l'esame del cuoio capelluto umano e per l'analisi dei capelli, ad esempio per la ricerca sulla perdita di capelli. Con l'alto ingrandimento fino a 200 volte, un singolo capello può essere visualizzato con grande dettaglio. Il sensore a 5 megapixel permette di visualizzare le immagini microscopiche, senza perdita di qualità, su grandi schermi o quando devono essere stampate immagini di grandi dimensioni.



## TrichoScope Polarizer

Il TrichoScope Polarizer di Dino-Lite (MEDL4HM) è un ottimo strumento per l'esame del cuoio capelluto umano e per l'analisi dei capelli, ad esempio per la ricerca sulla perdita di capelli. Con l'alto ingrandimento fino a 200 volte, un singolo capello può essere visualizzato con grande dettaglio.



USB 2.0



FUNZIONALITÀ  
MISURAZIONE



REGOLABILI  
~10-70x & 200x



USB 2.0



FUNZIONALITÀ  
MISURAZIONE



REGOLABILI  
~10-70x & 200x



5 MEGAPIXEL  
2592 x 1944



8 LED BIANCHI  
COMMUTABILI



SEDE  
METALLICA



BLOCCO  
INGRANDIMENTO



1,3 MEGAPIXEL  
1280 x 1024




8 LED BIANCHI  
COMMUTABILI



POLARIZZATORE  
ANTI RIFLESSO



POLARIZZATORE  
ANTI RIFLESSO

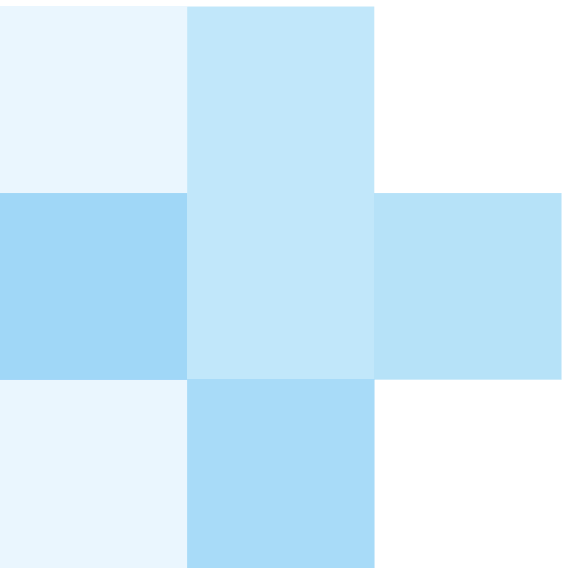

I prodotti medicali Dino-Lite sono  
Dispositivi Medici di 1° Classe -  
Ai sensi della direttiva 93/42/EEC  
modificata 2007/47/CE.

2016Q3 Copyright © 2016 IDCP BV

**Dino-Lite**  
**Digital Microscope Medical**

[www.dino-lite.eu/medical](http://www.dino-lite.eu/medical)  
[www.dino-lite.eu](http://www.dino-lite.eu)